

BIOBASIC 210, 310, 410, 600



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

La gamme **BIOBASIC** offre une solution de stockage économique pour une multitude d'applications.


Avec l'PSence de parois froides, les alarmes température, l'ATEX interne/externe et une interface conviviale, la gamme **BIOBASIC** dispose de fonctionnalités exceptionnelles.

Avec quatre tailles au choix, la gamme **BIOBASIC** est bien adaptée pour une utilisation avec un encombrement réduit où les performances, les fonctionnalités et le rapport qualité-prix sont primordiaux. Les armoires **BIOBASIC** sont proposées comme réfrigérateurs ou congélateurs.




BIOBASIC 210, 310, 410, 600

La gamme **BIOBASIC** est disponible en version réfrigérateur ou congélateur modèles 125L, 218L, 346L ou 610L.

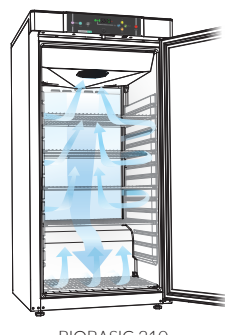

BIOBASIC 310

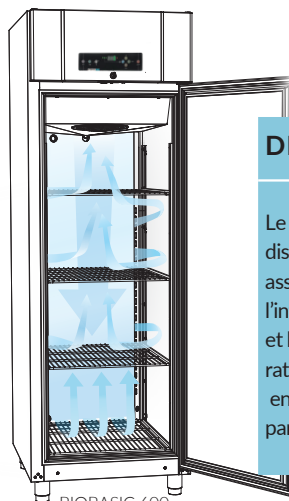

BIOBASIC 600

DISTRIBUTION D'AIR


Le système exceptionnel de distribution d'air canalisée assure que la température à l'intérieur de l'armoire soit stable et homogène. Avec un évaporateur tubes/ailettes placé en partie haute, il n'y a pas de parois froides dans l'armoire.

Spécifications techniques	BIOBASIC RR				BIOBASIC RF			
	210	310	410	600	210	310	410	600
Plage de température	+2/+15 °C				-25/-5 °C			
Température ambiante	Porte pleine +10 °C/+35 °C/porte vitrée +10 °C/+32 °C			Porte pleine +10 °C/+43 °C	Porte pleine +10 °C/+35 °C			Porte pleine +10 °C/+43 °C
Régulateur	Régulateur convivial BIOBASIC avec alarmes de température acoustique / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme et fonction réglage offset sonde.				Régulateur convivial BIOBASIC avec alarmes de température acoustique / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme et fonction réglage offset sonde.			
Matériaux à l'intérieur	Moule PS			Inox	Moule PS			Inox
Matériaux à l'extérieur	Laqué blanc			Laqué blanc	Laqué blanc			Laqué blanc
Dimensions mm (L x P x H)	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876	700 x 895 x 2125	595 x 640 x 831	595 x 640 x 1220	595 x 640 x 1876	700 x 895 x 2125
Volume brut	125 litres	218 litres	346 litres	610 litres	125 litres	218 litres	346 litres	610 litres
Volume net	104 litres	189 litres	312 litres	536 litres	104 litres	189 litres	312 litres	536 litres
Grilles rilsanisées (nombre total)	3	4	6	4	3	4	6	4
Fluide frigorigène	R600a			R290	R600a			R290
Consommation d'énergie	0,43/0,79 kWh/24h	0,51/0,90 kWh/24h	0,59/1,31 kWh/24h	1,44 kWh/24h	1,47 kWh/24h	1,56 kWh/24h	2,06 kWh/24h	3,77 kWh/24h
Niveau sonore	33,3 dB(A)	34,1 dB(A)	33,2 dB(A)	44,4 dB(A)	37,7 dB(A)	37,8 dB(A)	36,6 dB(A)	44,4 dB(A)
Partie inférieure	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	2 roulettes / 2 pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur	4 Pieds réglables en hauteur
Diffusion d'air	Système de distribution d'air ventilé de Gram BioLine				Système de distribution d'air ventilé de Gram BioLine			
Système de dégivrage	Dégivrage automatique intelligent avec ré-évaporation des condensats				Dégivrage automatique intelligent avec ré-évaporation des condensats			
Passage de sondes	1			2	1			2
Marquage ATEX	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc ExVeritas 26 ATEX 2343 X	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc ExVeritas 26 ATEX 2343 X	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc ExVeritas 26 ATEX 2343 X	II 3G Ex ec ic IIB T6 Gc ExVeritas 26 ATEX 2342 X	II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc ExVeritas 26 ATEX 2343 X	II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc ExVeritas 26 ATEX 2343 X	II 3G Ex ec ic IIB T3 Gc ExVeritas 26 ATEX 2343 X	II 3G Ex ec ic IIB T2 Gc ExVeritas 26 ATEX 2342 X



Panneau supérieur du régulateur BIOBASIC

Le régulateur BIOBASIC est spécialement développé pour les utilisateurs de BIOBASIC. Parmi ses nombreuses fonctionnalités, il y a les alarmes de température sonore / visuelle, alarmes de porte, contact sec de report d'alarme (NO/NF). Fermeture à clé en standard.

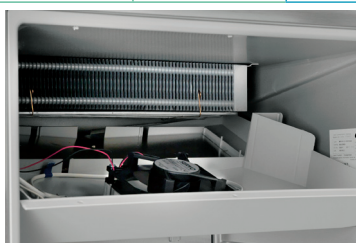

La performance est la clé

Avec une conception intelligente et des composants de qualité, la gamme BIOBASIC parvient à offrir une solution économique avec un faible encombrement.



ATEX interne et externe

La gamme BIOBASIC offre une conformité complète ATEX - à la fois interne et externe - sans coût supplémentaire. Les armoires BIOBASIC sont conformes à la norme EN/IEC 60079-15, appareils électriques pour une utilisation dans la catégorie 3, Zone 2 endroits où des gaz explosifs atmosphères peuvent être présents.